

Benforankret høresystem

Oplev Ponto lydprocessoren

Afprøvning med et Softband eller en hovedbøjle



Because
sound matters



oticon
MEDICAL

Prøv det, før du beslutter dig

Du har mulighed for at afprøve et benforankret høresystem (BAHS) med et Softband eller en hovedbøjle. Når du afprøver en Ponto lydprocessor i forskellige hverdagsituationer, vil du få en ide om, hvordan et høreimplantat kan gavne din hørelse. Efter implantationen oplever de fleste personer endnu bedre lyd.

Denne brochure indeholder to hovedafsnit:

Dagbog (afsnit 1)

Til at hjælpe dig med at træffe en beslutning på et bedre grundlag, beder vi dig om at udfylde dagbogen i denne brochure. Til dette anbefaler vi, at du bruger Ponto i hverdagsituationer som fx:

- Når du er hjemme (samtaler i rolige omgivelser)
- Når du ser fjernsyn
- Når du er sammen med venner og familie (samtaler i støjende omgivelser)
- Når du er ude
- Når du taler i telefon

Produktguide (afsnit 2)

I dette afsnit får du yderligere oplysninger om, hvordan du bruger din Ponto. Det vil sikre, at din afprøvning forløber så godt som muligt.

I brugervejledningen til Ponto lydprocessor kan du finde alle oplysninger og detaljerede anvisninger.



Hvis du foretrækker det, kan du besvare spørgsmålene i appen Ponto Care på din iPhone®.



Scan QR-koden for at hente appen



Situation: **Når du er hjemme (samtaler i rolige omgivelser)**

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto

Situation: **Når du ser fjernsyn**

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto



Situation: **Når du er sammen med venner og familie (samtale i støjende omgivelser)**

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto

Situation: **Når du er ude**

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto



Situation: **Når du taler i telefon. Hvis du har parret din lydprocessor med din telefon (se side 10), skal du benytte den til at ringe op eller modtage et opkald**

Bemærk: Dette fungerer kun på en iPhone. Med Android™-telefoner skal der bruges en ConnectClip. Du kan få mere at vide hos din hørespecialist.

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto


Angiv din egen situation (fx på arbejde, i skolen eller når du lytter til musik):

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto

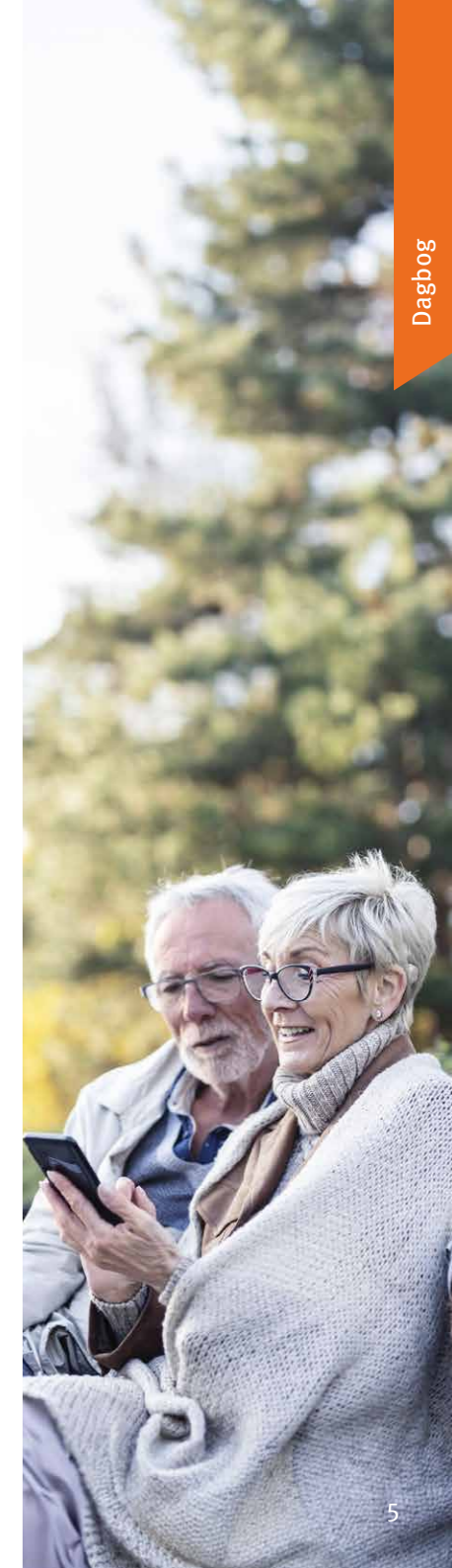

Angiv din egen situation (fx på arbejde, i skolen eller når du lytter til musik):

Dato/tid:.....

Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto

Angiv din egen situation (fx på arbejde, i skolen eller når du lytter til musik):

Dato/tid:.....


Oplevelse med Ponto



Oplevelse uden Ponto



Overblik over lydprocessoren

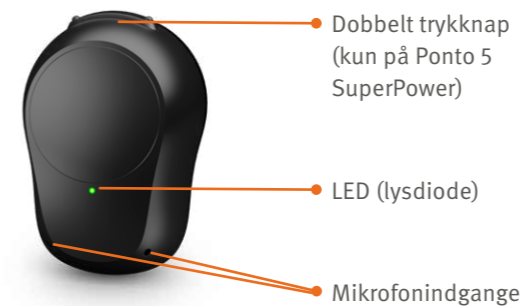

Bemærk: Sikkerhedssnoren er beregnet til at hjælpe dig med at undgå at tabe lydprocessoren under fysisk aktivitet eller i andre situationer, hvor processoren kan falde af. Du kan fastgøre sikkerhedssnoren til lydprocessoren og sætte clipsen fast på tøjet.

Placering af lydprocessoren

For at opnå det bedste resultat skal du anbringe lydprocessoren lodret med mikrofonindgangene vendende nedad, justeret vandret.

For at undgå feedback (hyletone) skal du sørge for, at intet berører lydprocessoren (fx øret, huden eller en hue).



Ponto på et Softband




Ponto på en hovedbøjle

Sådan tænder og slukker du for lydprocessoren



Tænd

Luk batteriskuffen med batteriet i.

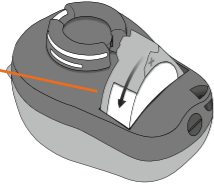

Sluk

Åbn batteriskuffen helt. Inden lydprocessoren placeres i dens etui, skal batteriet fjernes for at undgå, at enheden dræner batteriet unødvendigt.

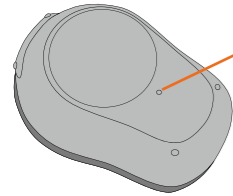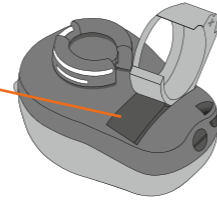


LED (valgmulighed)

To lange grønne blink angiver, at lydprocessoren er tændt.

Sådan udskifter du batteriet

Ponto 5 SuperPower benytter et 675-batteri (blå pakke), og Ponto 5 Mini benytter et 312-batteri (brun pakke). Det bedste resultat opnås ved at anvende et zink-luftbatteri af høj kvalitet.

1. Åbn

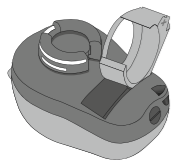

Åbn batteriskuffen helt. Tag batteriet ud.


2. Fjern mærkaten



Fjern mærkaten fra ++-siden på det nye batteri.

Bemærk: Vent 2 minutter, så batteriet iltes for at sikre optimal funktion.


3. Isæt batteriet

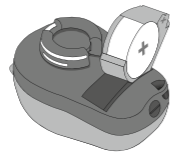


Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at ++-siden vender nedad.

Bemærk: Hvis batteriet sættes forkert i, kan batteriskuffen ikke lukkes. Hvis du bruger vold, risikerer du at beskadige batterirummet.

4. Luk

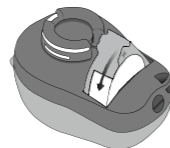

Luk batteriskuffen. Lydprocessoren vil afspille en jingle.

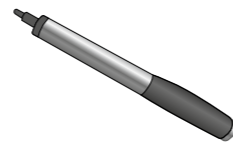

Multiværktøj

Bemærk: Der kan benyttes et multiværktøj til at skifte batteri. Brug den magnetiske ende til at tage batteriet ud og sætte det i.

Justering af lydstyrke

Ponto 5 SuperPower

Lydstyrken kan justeres med den dobbelte trykknop (se side 7). Kort tryk for at justere lydstyrken. Når processoren sidder på hovedet, skrues der op for lydstyrken med den fremadvendte knap, og der skrues ned for lydstyrken med den bagudvendte knap. Du kan også justere lydstyrken i appen Oticon Companion.

Ponto 5 Mini

Du kan justere lydstyrken i appen Oticon Companion på din telefon.



Appen Oticon Companion




Scan QR-koden for at hente appen.




Parring af lydprocessoren med din iPhone

1. Indstillinger

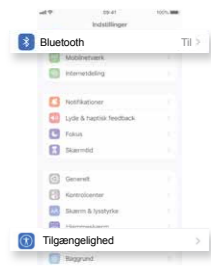


Åbn din iPhone, og gå til "Indstillinger". Sørg for, at Bluetooth® er slået til. Vælg derefter "Tilgængelighed".

2. Tilgængelighed

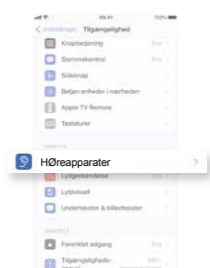

Vælg "Høreapparater" på skærmen "Tilgængelighed".

3. Tænd

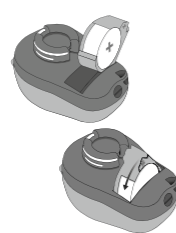


Åbn og luk batteriskuffen på lydprocessoren. Lydprocessoren forbliver i parringstilstand i 3 minutter.

4. Høreapparater



Kontrollér, om din iPhone har registreret din lydprocessor.


5. Din lydprocessor

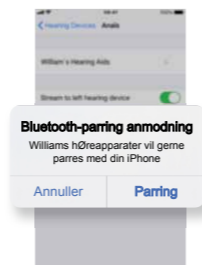

Når lydprocessoren er registreret, kan du parre den med din iPhone.


Sådan parrer du din Android-telefon med ConnectClip

1. Indstillinger

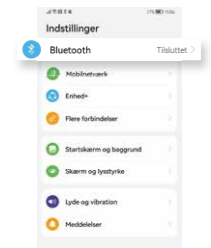


Åbn din telefon, og gå til "Indstillinger". Sørg for, at Bluetooth® er slået til. Vælg derefter "Bluetooth".

2. Tænd ConnectClip

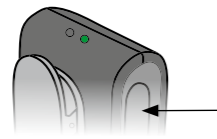

Tryk på multiknappen, og hold den inde i ca. 3 sekunder, indtil strømindikatoren lyser konstant grønt.


3. Parring

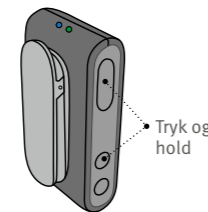

Tryk samtidigt på multiknappen og knappen for lydstyrke op i 6 sekunder, indtil statusindikatoren BLINKER BLÅT.

Bemærk: ConnectClip forbliver i parringstilstand i 3 minutter.


4. Aktivering af parring

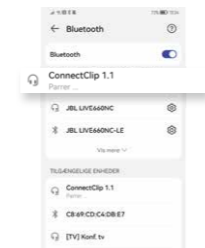

Søg efter, og dan par med ConnectClip.

Indtast pinkode: Indtast 0000 (fire nuller), hvis din telefon anmoder om en pinkode.

5. Tilsluttet enhed

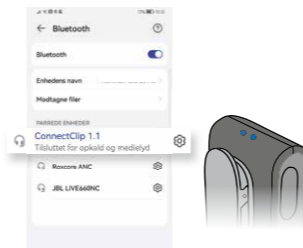


Når parringen med din mobiltelefon er udført, lyser statusindikatoren KONSTANT BLÅT.

Kontakt os

Du kan kontakte os samt følge vores Facebook-side: www.facebook.com/OticonMedicalDK

Find ud af mere om Ponto-systemet, og om hvordan det kan gavne din hørelse og dit daglige liv, ved at gå ind på: www.oticonmedical.dk

Vi hører meget gerne fra dig!

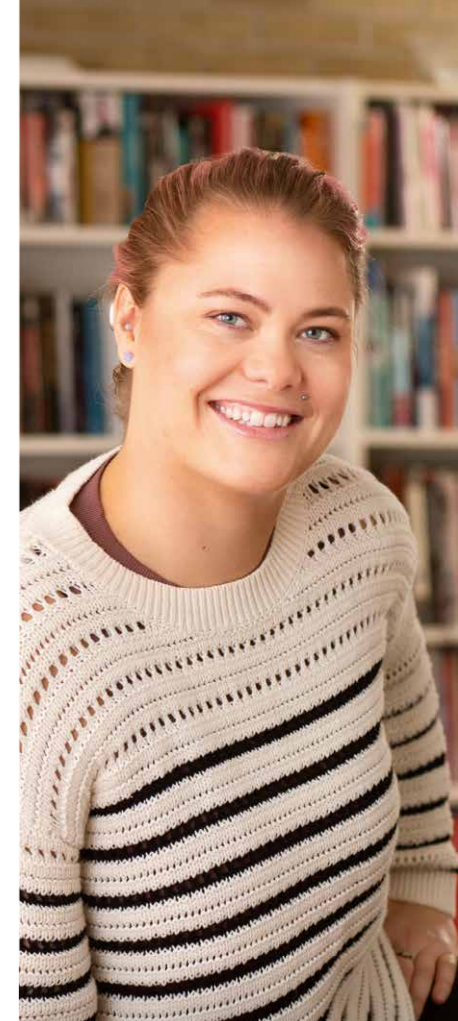

Vigtige ting at overveje

- Lydprocessorerne, tilbehør og batterier skal opbevares, så børn og andre, der måtte være i fare for at sluge disse genstande eller på anden måde komme til skade, ikke kan komme til dem.

Bemærk: Brug altid den børnesikrede batteriskuffe for børn under 36 måneder. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der søges akut lægehjælp.

- Lydprocessoren er ikke vandtæt. Tag den altid af før brusebad, badning eller svømning. Hvis lydprocessoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og batteriet tages ud, så det kan tørre.
- Undgå at udsætte lydprocessoren for ekstrem varme.

I brugervejledningen til Ponto lydprocessor kan du finde alle oplysninger og detaljerede anvisninger.

“

En af de bedste ting ved at gå i gang med denne proces med at få BAHS var, at jeg kunne afprøve det på et Softband. Det er ligesom at købe nye sko. Hvis du ikke kan lide dem, returnerer du dem bare, og der er ingen skade sket.”

Jamina, tidligere høreapparatbruger, nuværende Oticon Medical BAHS-bruger

Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare høreløsninger. Vi gør en stor indsats for at berige mennesker med lyd, uanset hvor i livet de befinder sig. I mere end ti år har vi gjort benforankrede høresystemer mere tilgængelige ved at forenkle behandlingen for både kirurger, audiologer og patienter.

Vi mener, at patienter og hørespecialister til enhver tid skal kunne vælge den optimale løsning. Vi kalder det “Frit valg”, og det har altid været af afgørende betydning for Oticon Medical. Det er derfor, at vores løsninger er udviklet til at være kompatible, når det er muligt. Det vil sige, at et implantat fra Oticon Medical er et bevis på vores livslange support.

Vi arbejder sammen med andre for at sikre, at hver eneste af vores løsninger designes med fokus på brugerens behov. Vi engagerer os i høj grad i at skabe innovative løsninger og yde support, der forbedrer livskvaliteten og hjælper mennesker med at leve livet fuldt ud – nu og i fremtiden.

Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00